

VA-EE007



NORTH AMERICA

E-mail: support@vava.com

Tel: 1-888-456-8468

(Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)

Address: 4674 Lakeview Blvd, Fremont,
CA 94538

EUROPE

E-mail:

support.uk@vava.com(UK)

support.de@vava.com(DE)

support.fr@vava.com(FR)

support.es@vava.com(ES)

support.it@vava.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH,
Halstenbeker Weg 98C,
25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@vava.com(JP)

JP Importer: 株式会社ニアバイダイレ
クトジャパン

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress

Technology Development Co., Ltd.

Address:

333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of
Conformity: [https://www.vava.com/downloads-
VA-EE007-CE-Cert.html](https://www.vava.com/downloads-VA-EE007-CE-Cert.html)




ELECTRIC TOOTHBRUSH
User Guide

製品図

CONTENTS


English	01/07
Deutsch	08/15
Français	16/23
Español	24/31
Italiano	32/39
日本語	40/46

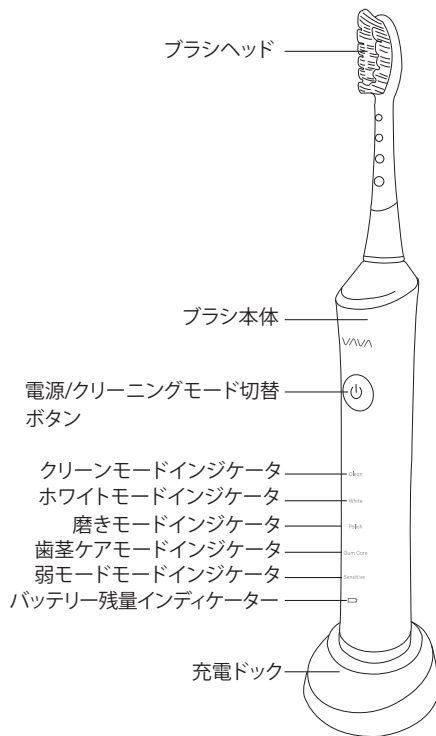


同梱物

- 1×VAVA電動歯ブラシ(モデル番号:VA-EE007)
- 1×充電器
- 1×インダクティブ充電接点付きトラベルケース
- 1×マイクロUSBケーブル
- 2×キャップ付標準ブラシヘッド
- 1×キャップ付き柔らかブラシヘッド
- 1×キャップ付マッサージブラシヘッド

電動歯ブラシの使用方法

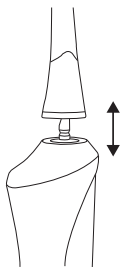

1. ブラシヘッドを本体に挿入します。

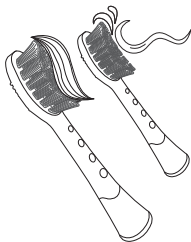

2. ブラシをすすぎ、適切な量の歯磨き粉をブラシにつけます。


3. 電源ボタンを押して電動歯ブラシをオンにします。オンの状態で電源ボタンを押すと、クリーニングモードが変わります。電源をオフにするには電源ボタンを長押しする(約5秒間)か、モードを切り替えると最後にオフになります。

モード	目的	毎分 ブラシ	デフォルト タイマー設定
クリーン モード	定期的なク リーニング と歯の清掃	41000	クリーニング領 域を切り替える 目安として30秒 ごとに一時停止 し、2分間のセッ ションが終了す ると停止します
ホワイト モード	歯の清掃と 美白	48000	最初の2分間は 30秒ごとに、最 後の30秒間は 15秒ごとに休止 し、合計2.5分間 のセッションが 終了すると停止 します
磨きモ ード	汚れ低減	45000	30秒ごとに一時 停止し、1分間の セッションが終 了すると停止し ます。

歯茎ケアモード	歯茎のマッサージと清掃	35000	30秒ごとに一時停止する2分間のクリーニングと15秒ごとに一時停止する1分間の研磨
弱モード	敏感な歯や歯肉の穏やかなケア	31000	30秒ごとに一時停止し、2分間のセッションが終了すると停止します。


注意：

初めてのご使用の際には弱モードを選択することをお勧めします。

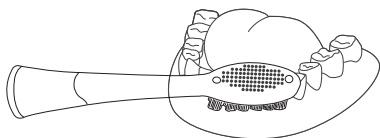

4. 歯茎に対して45°の角度でブラシを付け、ブラッシングを開始します。

注：電動歯ブラシの電源をオンにする前に、まずブラシを口に入れてください。

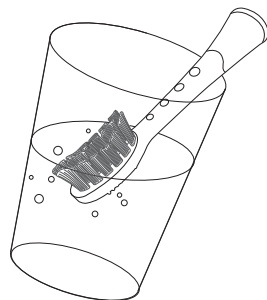

5. 水でうがいて、ブラシをすすいでください。


メモリ機能

5秒間長押しと電源切の場合、動歯ブラシは、電源オフになる直前に使用したクリーニングモードを記憶します。次回使用開始するときには最後に使用したモードで起動します。


低電池通知

バッテリーが少なくなると、バッテリーインジケータが赤く点滅します。再び使用する前に電動歯ブラシを充電してください。

電動歯ブラシの充電

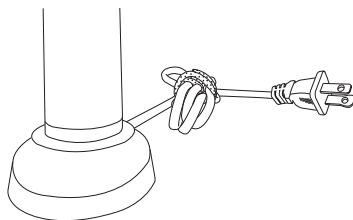

充電ドック

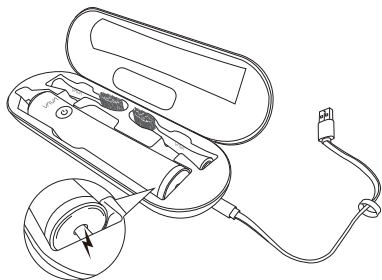

トラベルケース

注意：

- ・ 付属のUSBケーブルと5V / 1Aアダプタを使用して、トラベルケースを通して歯ブラシを充電してください。
- ・ 歯ブラシが充電されるとバッテリーインジケータが点滅し、充電が完了すると点灯します。

仕様

モデル	VA-EE007
動作電圧	AC 100 - 240V 50/60Hz
パワー	3W
充電時間	16 hours
稼働時間	モード設定に応じて3~8週間
防水仕様	IPX7

注意

- ・ 3ヶ月ごとにブラシヘッドを交換してご使用ください。
- ・ 干渉や危険を防ぐために充電ドックに金属物を置かないでください。
- ・ 本製品は、身体的、感覚的または精神的な能力が低下している方(子供を含む)による使用を目的としたものではありません。安全責任者による機器の使用に関する指導を受けていない限り使用してはいけません。お子様が、本製品で遊ぶことがないように注意してください。
- ・ 重度の歯周病を患っている方は、使用前に医師に相談してください。
- ・ 歯のホワイトニングのための研磨剤を含む歯磨き粉や、練歯磨剤(練り歯磨き)は使用しないでください。
- ・ ブラシを歯や歯茎に強く押し付けたり、長時間にわたって1つの領域に集中して磨いたりしないでください。
- ・ 幼児、子供、操作できない人は、この製品の使用を許可しないでください。
- ・ 治療中の歯や不安定な義歯など口腔衛生上の問題がある場合は、ブラシを使用しないでください。
- ・ 落とさないでください。歯ブラシ本体が損傷したら使用を中止してください。
- ・ 極端な温度を避けてください。
- ・ 解体しないでください。

www.vava.com